



วิธีการแก้ไข ปัญหาพิมพ์ใบรับรองแพทย์ แล้วขึ้น Error : รหัส 1001

Error : {"result";{};message ":"invalid signature rectangle","message_code":1001}


1.ในส่วนของ โรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม HOSxP XE และ โปรแกรม HOSxP Version 3 แนะนำให้โปรแกรม HOSxP XE / HOSxP PCU XE เวอร์ชันของเดือนมกราคม 2565 อัปเดต เพื่อแก้ไขแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ใน Report Designer > โดยทำการแก้ไขและบันทึกแบบฟอร์มเข้าไปที่บับชีใหม่ เพื่อให้ระบบ Generate Shape เวอร์ชันใหม่ของลายเซ็นแพทย์ออกมา

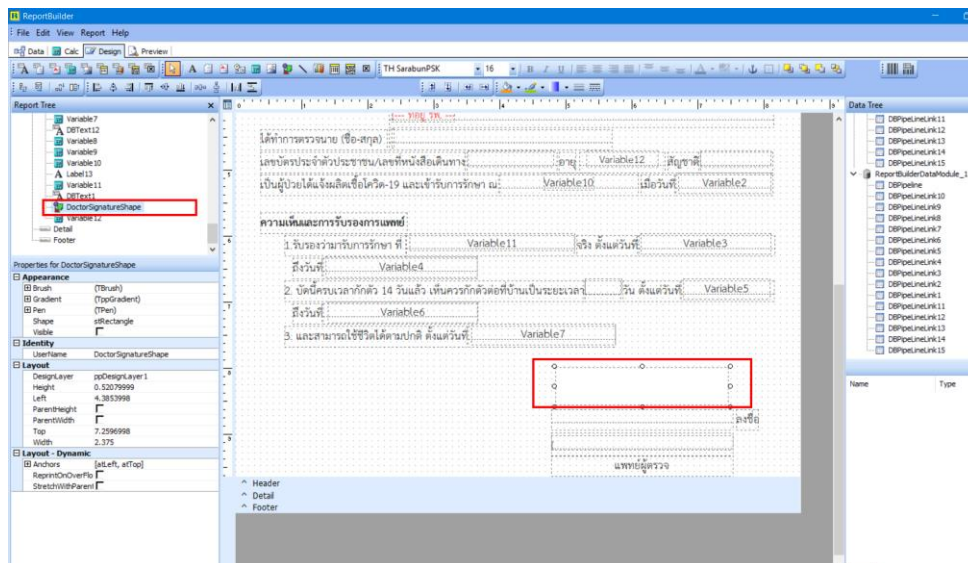

2.ตรวจสอบการกำหนดค่า พารามิเตอร์ของแบบฟอร์ม Data Type ต้องเป็น 'Number'

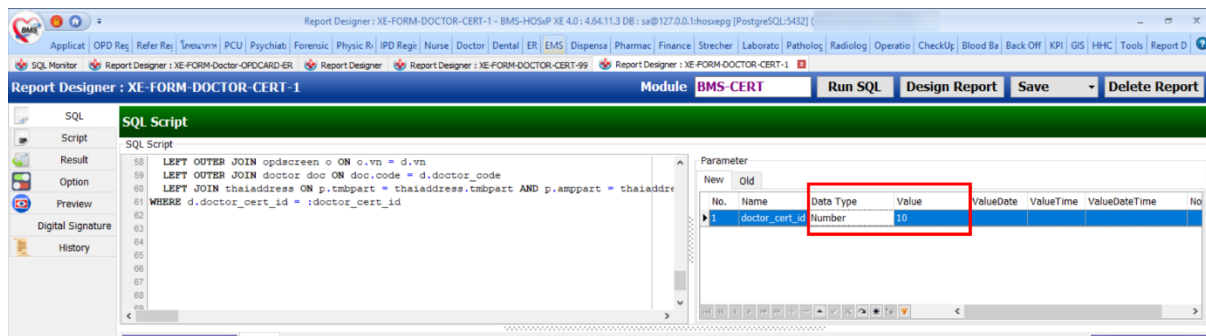

3.ใน report designer > ต้องเพิ่ม shape ของลายเซ็นแพทย์ และตั้งชื่อ Shape ใน UserName='DoctorSignatureShape'

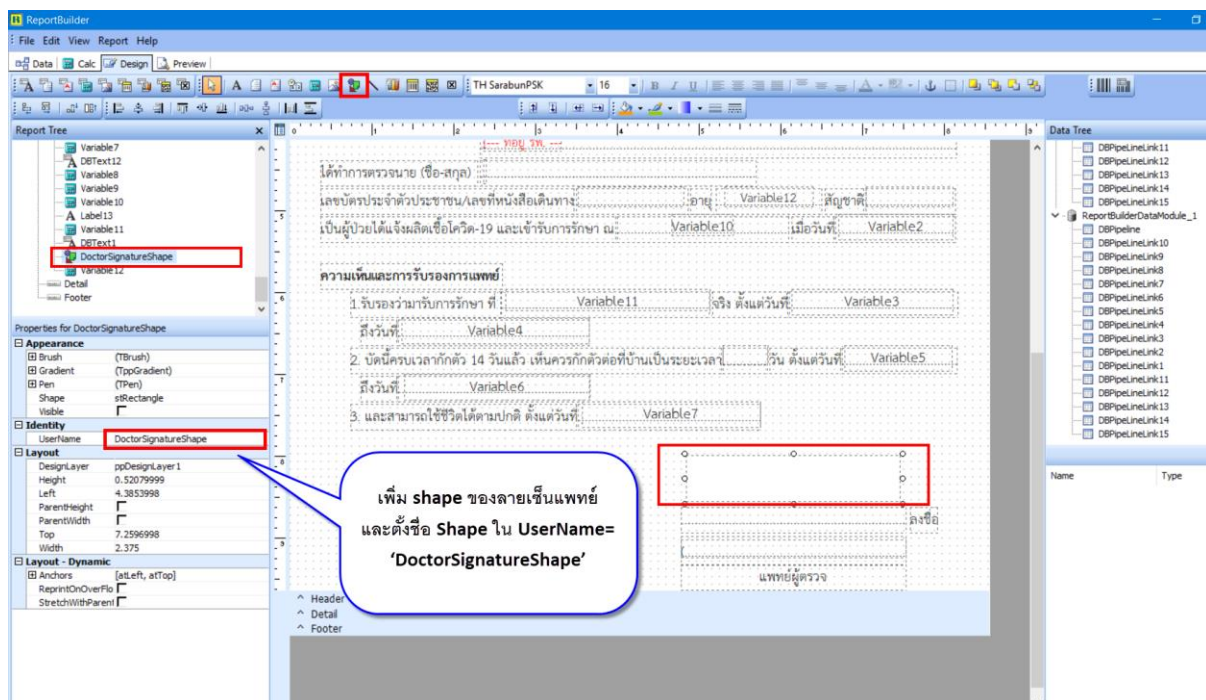

วิธีการแก้ไข ปัญหาพิมพ์ใบรับรองแพทย์ แล้วขึ้น Error : รหัส 1007

Error : {"result":{},"message":"PDF from ca is return a empty PDF file after sign a signature","message_coode":1007}

1.ตรวจสอบการใส่ข้อมูลรหัส Token ของแพทย์ ในหน้าข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ และรูปภาพลายเซ็น ที่ลงทะเบียนผ่าน INET

The screenshot displays the 'HOSxPDoctorEntryForm' application window. On the left sidebar, the 'Token' option is selected and highlighted with a red box. The main area shows a table with columns 'ลำดับ' (Serial), 'ประเภท' (Type), and 'Key'. The first row contains the value '1' under 'ลำดับ', 'INET Certification Authorities' under 'ประเภท', and '123456789' under 'Key'. Below the table, a 'DoctorTokenAccountEntryForm' dialog box is open, also highlighted with a red box. This dialog contains a 'ประเภท' dropdown menu set to 'INET Certification Authorities', a 'Key 1' field with the value '123456789', and a 'Key 2' field with a long alphanumeric string. A 'Validate' button is located to the right of the 'Key 2' field. At the bottom of the dialog are buttons for 'ลบ' (Delete), 'บันทึก' (Save), and 'ปิด' (Close). The main application window also has a 'Log' button in the top right corner and a 'ลบ' button at the bottom left.

ลำดับ	ประเภท	Key
1	INET Certification Authorities	123456789

DoctorTokenAccountEntryForm

DoctorTokenAccount

ประเภท: INET Certification Authorities


Key 1: 123456789

Key 2: 1E5BCA7FA99D2A29715A999469F3F7E9C4F6391BF2AB0303C70FC5D84F33DB36B85D5A8D0ABE41

Validate

ลบ บันทึก ปิด

- กำหนดผ่านโปรแกรม HOSXPXE / HOSXP PCU XE โดยไปที่เมนู tools > system setting > main setting > กำหนด รหัส ที่ช่อง INET Hospital Certificate Service ID และ INET Hospital Certificate Service Secret รพ. ที่ได้จากการลงทะเบียนทาง INET

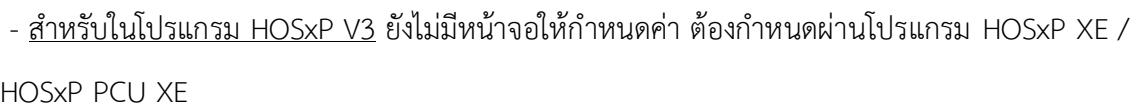

SQL Query

Task ResyncVN G>SQL Get

Run Save Execute Update Excel Export Export Data Load from file Append Direct Read only Repeat Execute Immediate Editor No GW

SQL

Tables sys_var Filter

SQL SQL Editor

select * from sys_var;

Result Query Designer Pivot Grid RAW Object Info Cloud Data Other SQL RtcXML Cloud Mongo

Drag a column header here to group by that column

sys_name	sys_value
INET_HOSPITAL_KEY	1411
INET_HOSPITAL_SECRET	1E5BCA7FA99D2A29715A999469F3F7E9C4F6391BF2AB0303C70FC5D84F33DB369003EA66EFF70EC5

1 of 2

Total Records: 3

ทำการเพิ่ม
INET_HOSPITAL_KEY และ
INET_HOSPITAL_KEY
เสร็จแล้วทำการกำหนดค่าในฟิลด์ sys_value